


Écouvillonnage combiné oral (buccal) et nasal profond

Public
Health
Ontario


Santé
publique
Ontario

1. Insérer l'écouvillon entre la joue et la gencive inférieure. Faire tourner l'écouvillon trois fois (3x)
2. Répéter l'étape 1 de l'autre côté
3. Incliner la tête du patient vers l'arrière
4. Insérer l'écouvillon dans la narine à environ 2,5 cm (~1 po)* directement vers l'arrière (et non vers le haut); arrêter lorsque vous rencontrez une résistance
5. Faire tourner l'écouvillon plusieurs fois contre la paroi nasale
6. Laisser l'écouvillon en place quelques secondes pour qu'il absorbe les sécrétions
7. En utilisant le même écouvillon, répéter les étapes dans l'autre narine
8. Placer immédiatement l'écouvillon dans le tube stérile contenant le milieu de transport

Étapes 1-2

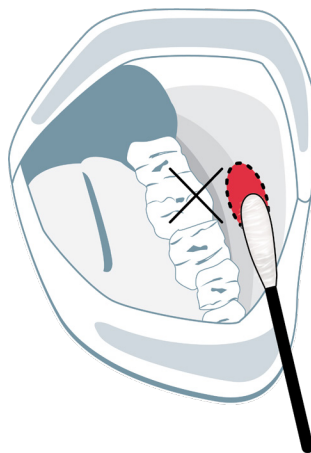

Étapes 3-8

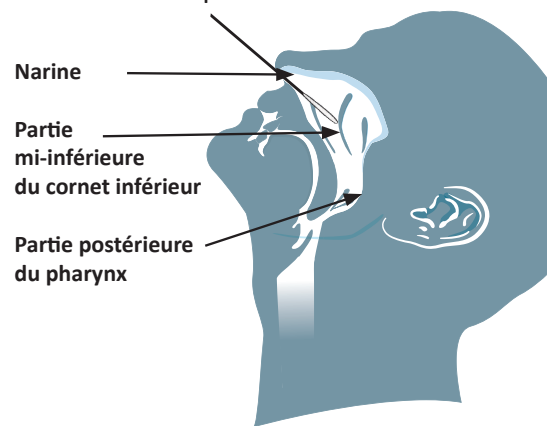

**La distance d'insertion de l'écouvillon sera différente chez les enfants.*